

Bijsluiter

Information for use

Nederlands

English



Putty Buddies

Ear Band-It

Ear Band-It ULTRA

2025/2026



voor
je oor



PUTTY
BUDDIES®

Hoe te gebruiken

Putty Buddies zachte siliconen oordopjes zijn uitgevonden door een KNO-arts met meer dan 40 jaar ervaring en worden wereldwijd door artsen aanbevolen voor zwemmen, douchen en algemene waterbescherming.

WAARSCHUWINGEN

Toezicht door een volwassene vereist. Niet aanbevolen voor duikdieptes van meer dan 3 meter. Niet aanbevolen voor gebruik met een badmuts. Niet aanbevolen voor geluidsisolatie of om te slapen. Vermijd contact met haar, lotions, zonnebrandcrème en chemicaliën. Gebruik schone en droge handen. Bewaar de oordopjes op een plaats met een gecontroleerde kamertemperatuur wanneer je ze niet gebruikt. Voor maximale bescherming moeten de oordopjes worden gedragen met de Ear Band-It of Ear Band-It ULTRA zwemhoofdband.

LET OP

Bedek alleen de opening van het oor. NIET IN DE GEHOORKANAAL INBRENGEN. Siliconen oordopjes zijn veilig wanneer je ze volgens de instructies gebruikt. Als de oordopjes in de gehoorgang zijn geduwd, probeer ze dan NIET zelf te verwijderen. Gebruik geen pincet, wattenstaafjes of andere hulpmiddelen, aangezien deze het oordopje verder in de gehoorgang kunnen duwen. Raadpleeg een KNO-arts (KNO-arts), omdat zij over de juiste instrumenten en vaardigheden beschikken om de oordopjes veilig te verwijderen. Een siliconen oordopje dat kort in de gehoorgang zit, kan onschadelijk zijn, mits je niet probeert het oordopje zelf te verwijderen en het per ongeluk dieper in de opening duwt. Gebruik het oordopje uitsluitend zoals aangegeven.

BELANGRIJK!

Om effectief te zijn, moet de Ear Band-It correct worden gedragen met oordopjes of oorstukjes. Niet aanbevolen voor duiken met het hoofd eerst.

WAARSCHUWING VERSTIKKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen. Alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren wanneer het oordopje niet wordt gebruikt.

How to use

Putty Buddies soft silicone ear plugs were invented by an Ear, Nose, Throat physician with over 40 years experience and are recommended by doctors worldwide for swimming, showering, and general water protection.

WARNINGS

Adult supervision required. Not recommended for diving depths greater than 10 feet. Not recommended for use with swim caps. Not recommended for noise prevention or sleeping. Avoid contact with hair, lotions, sunscreens, or chemicals. Handle with clean and dry hands. Store plugs in controlled room temperature environment while not in use. For maximum protection, ear plugs should be worn with the Ear Band-It or Ear Band-It ULTRA swimming headband.

CAUTION

Only cover opening of ear. DO NOT INSERT INTO EAR CANAL. Silicone ear plugs are safe when used as instructed. If ear plugs are pushed into ear canal, DO NOT try to remove yourself. Do not use tweezers, cotton swabs, or other devices as these may push the plug further into the ear canal. See an Ear, Nose, Throat (ENT) Physician as they have proper instruments and skill to remove the plugs safely. A silicone ear plug in the ear canal for a short time may be harmless, providing you do not attempt to remove the ear plug yourself and accidentally push it deeper into opening. Use only as directed.

IMPORTANT!

To be effective, the Ear Band-It must be properly worn with ear plugs or ear molds. Not recommended for diving head first.

WARNING CHOKING HAZARD

Small parts. Use only under adult supervision. Store away from children under 3 years old when not in use.

Hoe te gebruiken

- Oordopjes moeten door een volwassene worden ingebracht, nooit door een kind.
- Vorm het hele oordopje tot een bal. Druk het plat met uw vingers. Vorm het oordopje om de oorschelp te bedekken tot het goed past.
- Maak het oordopje los en verwijder het door het achter het oor omhoog te drukken.
- Oordopjes zijn herbruikbaar. Gooi het 2 weken na het eerste gebruik weg (maximaal 5 keer gebruiken) of als het oordopje barst, loslaat of vuil wordt.
- Scheur de oordopjes **NIET** uit elkaar en forceer ze niet in de gehoorgang.
- Gebruik **NIET** in combinatie met een badmuts.
- Gebruik het **NIET** om mee te slapen of om lawaai te voorkomen.
- Laat het **NIET** in contact komen met haar, lotions, zonnebrandcrème of chemicaliën. Gebruik schone en droge handen.

How to use

- Plugs should be applied by an adult, never a child.
- Shape whole plug into ball. Flatten with fingers. Shape to cover outer ear until snugly fit.
- Loosen and remove plugs by pressing up behind the ear.
- Plugs are reusable. Discard 2 weeks after initial use, (max 5 uses) or if plugs crack, separate or become dirty.
- **DO NOT** tear plugs apart or force into ear canal.
- **DO NOT** use a swim cap.
- **DO NOT** use for sleep or noise prevention
- **DO NOT** make contact with hair, lotions, sunscreens, or chemicals. Handle with clean and dry hands.



EAR
BAND-IT®



EAR
BAND-IT®

ULTRA



Hoe te gebruiken

Gebruiksaanwijzing

De Ear Band-It kruist op of onder de haarlijn. Bevestig hem achter de nek voor het beste resultaat. Houd er rekening mee dat de Ear Band-It mogelijk wat strak zit wanneer u hem voor het eerst opzet. Als dat het geval is, pak dan beide uiteinden vast en trek ze meerdere keren stevig aan om het neopreen uit te rekken.

Wasvoorschrift

De Ear Band-It blijft schoon in chloorwaterbaden, badkuipen of douches. Was de Ear Band-It indien nodig met de hand met een mild wasmiddel en laat hem aan de lucht drogen.

BELANGRIJK!

Om effectief te zijn, moet de Ear Band-It correct worden gedragen met oordopjes of oorstukjes. Niet aanbevolen voor duiken waarbij je met het hoofd eerst duikt.

How to use

Directions

Headband crosses at or below the hairline. Secure behind the neck for best results. Note that the headband may be skightly tight when first putting it on. If so, grab each end and pull firmly several times to stretch out the neoprene.

Care instructions

The Ear Band-It will stay clean in chlorinated pools, bathtubs, or showers. If washing is needed, hand was with mild detergent and air dry.

IMPORTANT!

To be effective, the Ear Band-It must be properly worn with earplugs or ear molds. Not reccomended for diving head-first.

Waarom Ear Band-It?

De Ear Band-It is uitgevonden door een KNO-arts met meer dan 40 jaar ervaring en wordt wereldwijd door artsen aanbevolen voor zwemmen, douchen en algemene bescherming. Hij is ontworpen om ervoor te zorgen dat oordopjes of oorstukjes op hun plaats blijven en water uit de oren houden. Het unieke ontwerp van de Ear Band-It biedt ultiem comfort en bescherming voor de oren.

Aanvankelijk werd de Ear Band-It op de markt gebracht voor kinderen met buisjes, zodat ze konden zwemmen. Dit is inmiddels uitgebreid naar waterliefhebbers van alle leeftijden met een zwemmersoor, trommelvliesperforaties of die gewoon niet van water in hun oren houden.

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 125 mensen last heeft van een zwemmersoor (otitis externa), terwijl bijna een miljoen mensen alleen al in de VS buisjes in hun oren hebben. Vóór de Ear Band-It was de enige optie voor deze mensen een badmuts. Deze was niet alleen lelijk en oncomfortabel, maar beschermde de oren vaak ook niet.

Why Ear Band-It?

The Ear Band-It was invented by an Ear, Nose, Throat physician with over 40 years' experience and is recommended by doctors worldwide for swimming, showering, and general protection. It was created to ensure ear plugs or ear molds stay in place and keep water out of the ears. The unique design of the Ear Band-It offers ultimate comfort and protection for the ears.

Initially the Ear Band-It was marketed to children with ear tubes, enabling them to swim. This has since been expanded to include water enthusiasts of all ages who have swimmer's ear, ear drum perforations, or simply do not like to get water in the ears.


Studies has shown that swimmer's ear (otitis externa) affects 1 in every 125 people, while nearly one million people have tubes placed in their ears annually in the USA alone. Prior to the Ear Band-It, the only option for these affected individuals was the bathing cap, which was not only unsightly and uncomfortable, but often times ineffective in protecting the ears.

Zo bepaal je de juiste maat Ear Band-It



Meet het hoofdomtrek voordat u bestelt!

Problemen met de maat en het gedoe van het retourneren van artikelen kunnen eenvoudig worden voorkomen door de hoofdomtrek te gebruiken, zoals aangegeven in de maattabel. Het gebruik van een zacht meetlint is het beste, maar een touwtje en een standaard meetlint werken ook.

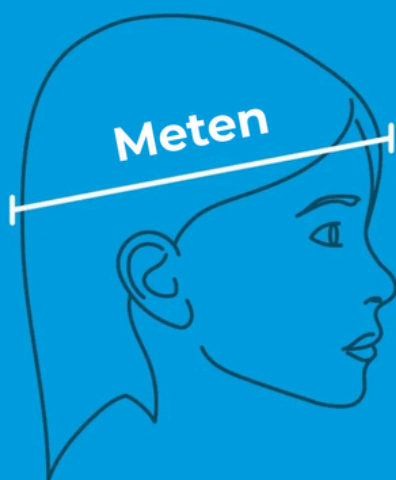

	Past op hoofdmaten van	Aanbevolen leeftijd*
<i>Small</i>	16.5 in – 18.5 in 42 cm – 47 cm	Tot 18 maanden
<i>Medium</i>	18.5 in – 20.5 in 47 cm – 52 cm	2 - 7 jaar
<i>Large</i>	20.5 in – 24 in 52 cm – 61 cm	8 jaar en volwassen

~~~~~ Houd er rekening mee dat de aanbevolen leeftijdscategorieën zijn gebaseerd op gemiddeld grote hoofden. ~~~~~


\*We zien vaak dat kinderen met een groter dan gemiddeld hoofd één maat groter nodig hebben als we alleen kijken naar de leeftijdsaanbevelingen. **NOGMAALS, HET IS ALTIJD HET BESTE OM DE MAAT TE METEN EN DE MAATTABEL TE CONTROLEREN.**

# How to measure for the right Ear Band-It size



## MEASURE HEAD CIRCUMFERENCE PRIOR TO ORDERING!

Sizing issues and the hassle of returning items can be avoided simply by measuring head circumference and referring to the size chart. Using a soft tape measure is best but a string and standard tape measure will work as well.

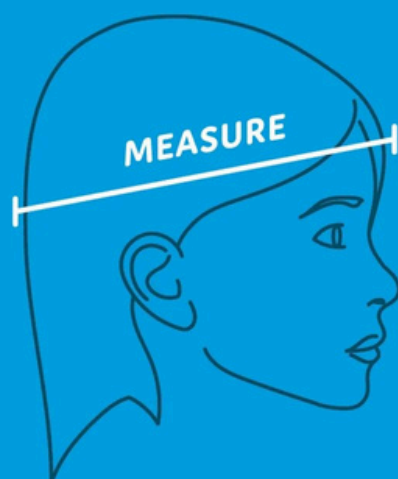

|               | Fits Head Size Range               | Recommended Age Range* |
|---------------|------------------------------------|------------------------|
| <i>Small</i>  | 16.5 in – 18.5 in<br>42 cm – 47 cm | Up to 18 months        |
| <i>Medium</i> | 18.5 in – 20.5 in<br>47 cm – 52 cm | 2 – 7 years            |
| <i>Large</i>  | 20.5 in – 24 in<br>52 cm – 61 cm   | 8 years to adult       |

~~~~ NOTE THAT RECOMMENDED AGE RANGES ARE BASED ON AVERAGE SIZED HEADS. ~~~~

*We often see kids with larger than average head sizes needing to go up one size if only referring to age recommendations. **AGAIN, IT IS ALWAYS BEST TO MEASURE AND CHECK THE SIZE CHART!**

Hoe je de Ear Band-It plaatst

1. Voorbereiding van de oren

Indien je Putty Buddies zwemoordoppen gebruikt, maak deze dan plat en plaats ze voorzichtig over je gehoorgang voordat je de Ear Band-It aanbrengt.

2. Ear Band-It plaatsen

Wikkel de Ear Band-It rondom het hoofd, zorg ervoor dat beide oren volledig bedekt zijn. De Ear Band-It kruist comfortabel op of net onder de haarlijn.

3. Pasvorm afstellen

Bevestig de Ear Band-It aan de achterkant van je nek voor een optimale en comfortabele pasvorm. Gebruik het klittenband om de band stevig op zijn plaats te houden.

4. Comfort controleren

Controleer of de Ear Band-It niet te strak zit, maar ook niet los genoeg om te verschuiven. Voor het beste resultaat draag je de Ear Band-It onder je haar. Zo blijft de Ear Band-It tijdens het zwemmen perfect zitten.

5. Verwijderen en opbergen

Verwijder de Ear Band-It voorzichtig na gebruik. Bewaar de Ear Band-It op een droge en schone plek om de levensduur te verlengen.

How to place the Ear Band-It

1. Preparing the ears

If you are using Putty Buddies swimming earplugs, flatten them and gently place them over your ear canal before applying the Ear Band-It.

2. Applying the Ear Band-It

Wrap the Ear Band-It around your head, ensuring both ears are completely covered. The Ear Band-It will cross comfortably at or just below your hairline.

3. Adjusting the fit

Attach the Ear Band-It to the back of your neck for an optimal and comfortable fit. Use the Velcro to keep the band securely in place.

4. Checking the comfort

Check that the Ear Band-It is not too tight, but not loose enough to slip. For best results, wear the Ear Band-It under your hair.

This will ensure the Ear Band-It stays in place while swimming.

5. Removal and storage

Carefully remove the Ear Band-It after use.

Store the Ear Band-It in a dry, clean place to extend its lifespan.

Materialen

De Ear Band-It is gemaakt van neopreen is niet giftig, BPA-vrij en latexvrij.

Materials

The Ear Band-It is made of neoprene and is non-toxic, BPA-free, and latex-free.