



Zwemmershoofdband

In combinatie met zachte en/of vormbare oordoppen, als Putty Buddies, houdt de Ear Band-It de oordopjes stevig op hun plaats en voorkomt hij effectief dat er water in de oren komt.

De zwemmershoofdband helpt oorontstekingen te voorkomen en ook zwemmersoor! Ideaal voor kinderen met buisjes in hun oren, een geperforeerd trommelvlies en andere ooraandoeningen. Ook te dragen met een cochleair implantaat mits i.c.m. zwembescherming van implantaat.



Alleen effectief in combinatie met zachte en/of vormbare oordoppen



Swimming headband

In combination with soft and/or moldable earplugs, such as Putty Buddies, the Ear Band-It holds earplugs firmly in place and effectively prevents water from entering the ears.


The swimming headband helps prevent ear infections as well as swimmer's ear! Ideal for children with ear tubes, a perforated eardrum, and other ear conditions. Can also be worn with a cochlear implant provided it is used in combination with the implant's swimming protection.



Only effective in combination with soft and/or moldable earplugs

Voor het bestellen eerst de hoofdomtrek meten!

Problemen met de maat en het gedoe van het retourneren van artikelen kunnen eenvoudig worden voorkomen door de hoofdomtrek te gebruiken, zoals aangegeven in de maattabel. Een zacht meetlint werkt het prettigst, maar een touwtje met een standaard meetlint is net zo goed te gebruiken.

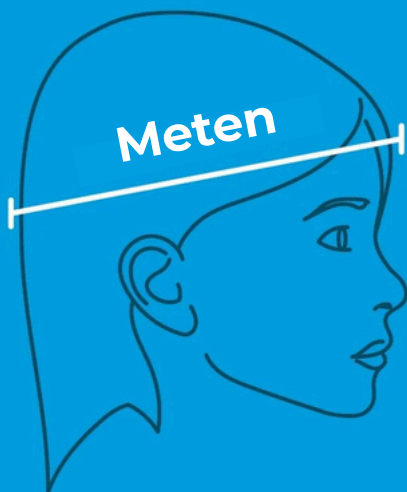

	Past op hoofdmaten van	Aanbevolen leeftijd*
<i>Small</i>	16.5 in – 18.5 in 42 cm – 47 cm	Tot 18 maanden
<i>Medium</i>	18.5 in – 20.5 in 47 cm – 52 cm	2 - 7 jaar
<i>Large</i>	20.5 in – 24 in 52 cm – 61 cm	8 jaar en volwassen

Houd er rekening mee dat de aanbevolen leeftijdscategorieën zijn gebaseerd op gemiddeld grote hoofden.

*Wij zien vaak dat kinderen met een groter dan gemiddeld hoofd één maat groter nodig hebben als we alleen kijken naar de leeftijdsaanbevelingen.


NOGMAALS, HET IS ALTIJD HET BESTE OM DE MAAT TE METEN EN DE MAATTABEL TE CONTROLEREN.



ADJUSTABLE
NEOPRENE
SWIMMING
HEADBAND

Measure the head circumference before ordering!

Problems with sizing and the hassle of returning items can easily be avoided by using head circumference, as indicated in the size chart. A soft measuring tape works best, but a piece of string with a standard measuring tape works just as well.

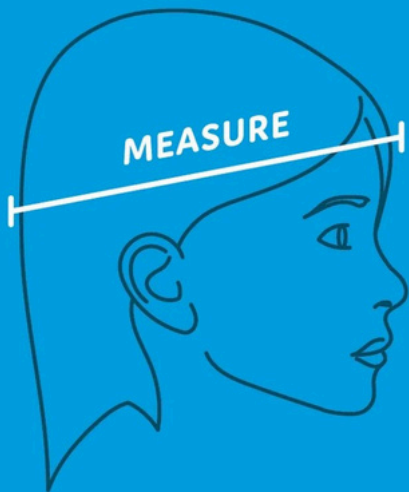

	Fits Head Size Range	Recommended Age Range*
<i>Small</i>	16.5 in – 18.5 in 42 cm – 47 cm	Up to 18 months
<i>Medium</i>	18.5 in – 20.5 in 47 cm – 52 cm	2 – 7 years
<i>Large</i>	20.5 in – 24 in 52 cm – 61 cm	8 years to adult

NOTE THAT RECOMMENDED AGE RANGES ARE BASED ON AVERAGE SIZED HEADS.

*We often see kids with larger than average head sizes needing to go up one size if only referring to age recommendations. **AGAIN, IT IS ALWAYS BEST TO MEASURE AND CHECK THE SIZE CHART!**



VERSTELBARE
NEOPRENE
ZWEMMERS
HOOFDBAND

Gebruiksaanwijzing

Instructies: De hoofdband kruist de haarlijn ter hoogte van of onder de haarlijn. Bevestig de hoofdband achter in de nek voor een comfortabele, aansluitende pasvorm. Draag de hoofdband onder het haar voor het beste resultaat. Houd er rekening mee dat de hoofdband in het begin iets strak kan zitten. Pak in dat geval beide uiteinden vast en trek een paar keer stevig om het neopreen op te rekken.

Onderhoudsrichtlijnen: De Ear Band-It blijft schoon in chloorwater in zwembaden, badkuipen of douches. Indien wassen nodig is, handwas met een mild wasmiddel en aan de lucht laten drogen.

Materiaal: De Ear Band-It is vervaardigd uit hoogwaardig neopreen en voorzien van een verstelbare klittenbandsluiting voor een comfortabele en veilige pasvorm.

Belangrijk! Om effectief te zijn, moet de Ear Band-It correct worden gedragen met vormbare en/of zachte oordopjes. Niet aanbevolen voor duiken met het hoofd eerst.

Waarom Ear Band-It?

De **Ear Band-It** is ontworpen door een KNO-arts met 40 jaar ervaring en wordt wereldwijd geadviseerd door doktoren voor zwemmen, douchen en algemene waterbescherming. Het is ontworpen om vormbare en/of zachte oordoppen stevig op hun plaats te houden en water uit de oren te weren. Het unieke ontwerp van de **Ear Band-It** biedt comfort en bescherming voor de oren.

Origineel is de **Ear Band-It** ontworpen voor kinderen met trommelvliesbuisjes, waardoor ze toch konden zwemmen. Dit is sindsdien uitgebreid en omvat nu waterliefhebbers van alle leeftijden met zwemmersoor, een geperforeerd trommelvlies of die simpelweg geen water in hun oren willen. Ook te dragen met een cochleair implantaat.

Uit onderzoek is gebleken dat zwemmersoor (otitis externa) bijna 1 op de 125 mensen treft, terwijl alleen al in de VS jaarlijks bijna een miljoen mensen buisjes in hun oren krijgen. Vóór de introductie van de **Ear Band-It** moesten mensen het doen met een badmuts, die onaantrekkelijk en oncomfortabel was en vaak ook onvoldoende bescherming bood.



ADJUSTABLE
NEOPRENE
SWIMMING
HEADBAND

How to use

Directions: The headband crosses the hairline at or below the hairline. Secure the headband at the back of the neck for a comfortable, snug fit. Wear the headband under the hair for best results. Please note that the headband may feel slightly tight at first. In that case, grasp both ends and pull firmly a few times to stretch the neoprene.

Care Guidelines: The Ear Band-It stays clean in chlorinated water in swimming pools, bathtubs, or showers. If washing is necessary, hand wash with a mild detergent and air dry.

Material: The Ear Band-It is made of high-quality neoprene and features an adjustable Velcro closure for a comfortable and secure fit.

Important! To be effective, the Ear Band-It must be worn correctly with moldable and/or soft earplugs. Not recommended for headfirst diving.

Why Ear Band-It?

The **Ear Band-It** was invented by an Ear, Nose, Throat physician with over 40 years' experience and is recommended by doctors worldwide for swimming, showering, and general water protection. It is designed to hold moldable and soft earplugs securely in place and keep water out of the ears. The unique design of the **Ear Band-It** offers comfort and protection for the ears.

Originally, the **Ear Band-It** was designed for children with ear tubes, enabling them to swim. This has since expanded and now includes water enthusiasts of all ages with swimmer's ear, perforated eardrums, or simply do not like to get water in the ears. Can also be worn with a cochlear implant.

Studies have shown that swimmer's ear (otitis externa) affects nearly 1 in 125 people, while nearly a million people in the US alone receive ear tubes annually. Before the introduction of the **Ear Band-It**, the only option for these affected individuals was the bathing cap, which was not only unsightly and uncomfortable, but often times ineffective in protecting the ears.

Ear Band-It bevestigen

1. Voorbereiding van de oren

Gebruik **altijd** zachte en/of vormbare oordoppen in combinatie met de Ear Band-It, zoals Putty Buddies. Breng de Putty Buddies aan zoals beschreven in de bijsluiters voordat je de Ear Band-It omdoet.

2. Ear Band-It aanbrengen

Wikkel de Ear Band-It rondom het hoofd, zorg ervoor dat beide oren volledig bedekt zijn. De Ear Band-It kruist comfortabel op of net onder de haarlijn.

3. Pasvorm afstellen

Bevestig de Ear Band-It aan de achterkant van de nek voor een optimale en comfortabele pasvorm. Gebruik de klittenband om de band stevig op zijn plaats te houden.

4. Comfort controleren

Controleer of de Ear Band-It niet te strak zit, maar ook niet los genoeg om te verschuiven. Voor het beste resultaat draag je de Ear Band-It onder het haar. Zo blijft de Ear Band-It tijdens het zwemmen perfect zitten.

5. Verwijderen en opbergen

Verwijder de Ear Band-It voorzichtig na gebruik. Bewaar de Ear Band-It op een droge en schone plek om de levensduur te verlengen.

Let op: de Ear Band-It is alleen effectief in combinatie met vormbare en/of zachte oordoppen. Het gebruik van harde of op maat gemaakte oordoppen wordt afgeraden, omdat de Ear Band-It deze uit het oor kan drukken.

Geproduceerd door

EarVolution
P.O. Box 10411
Phoenix, AZ 85064, USA
www.EarVolution.com
866.420.4255
© EarVolution Inc. 1992-2020



Gedistribueerd door

Voor je oor
Zandzuigerstraat 58, 1333 HD Almere
www.voorjeoor.nl
+ 31 6 5348299
info@voorjeoor.nl



How to put on the Ear Band-It

1. Preparing the ears

Always use soft and/or moldable earplugs in combination with the Ear Band-It, such as Putty Buddies. Apply the Putty Buddies as described in the IFU before putting on the Ear Band-It.

2. Applying the Ear Band-It

Wrap the Ear Band-It around the head, ensuring that both ears are fully covered. The Ear Band-It crosses comfortably at or just below the hairline.

3. Adjusting the fit

Secure the Ear Band-It at the back of the neck for an optimal and comfortable fit. Use the Velcro strap to keep the band firmly in place.

4. Checking comfort

Check that the Ear Band-It is not too tight, but also not loose enough to shift. For best results, wear the Ear Band-It under your hair. This ensures the Ear Band-It stays perfectly in place while swimming.

5. Removal and storage

Carefully remove the Ear Band-It after use. Store the Ear Band-It in a dry and clean place to extend its lifespan.

Please note: the Ear Band-It is only effective in combination with moldable and/or soft earplugs. The use of hard or custom-made earplugs is not recommended, as the Ear Band-It may push them out of the ear.

Produced by

EarVolution
P.O. Box 10411
Phoenix, AZ 85064, USA
www.EarVolution.com
866.420.4255
© EarVolution Inc. 1992-2020



Distributed by

Voor je oor
Zandzuigerstraat 58, 1333 HD Almere
www.voorjeoor.nl
+ 31 6 5348299
info@voorjeoor.nl

